




# QuikRead go<sup>®</sup> CRP és CRP+Hb

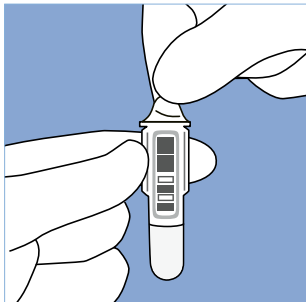


**1** Távolítsa el a küvetta védőfóliáját. A folyadék felszínének a küvetta jelölt két vonal között kell lennie. Ne érintse a küvetta alsó részén található átlátszó, sima felületeket.

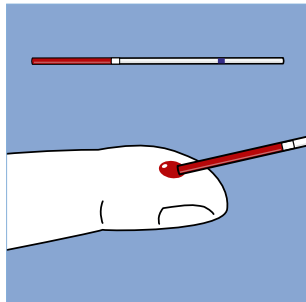

**2** Állítsa össze a kapillárist, vegyen le a betegtől 20 µl vért (a fehér dugóig töltsen). Győződjön meg arról, hogy nincs légbuborék a kapillárisban. Törölje le a felesleges mintát a kapilláris külső felületéről.

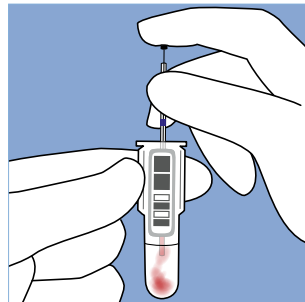


**3** Helyezze a mintát (20 µl) tartalmazó kapillárist a küvetta és a dugattyú segítségével adja hozzá a mintát a küvettaiban lévő pufferoldathoz. Győződjön meg arról, hogy a kapilláris teljesen kiürült.

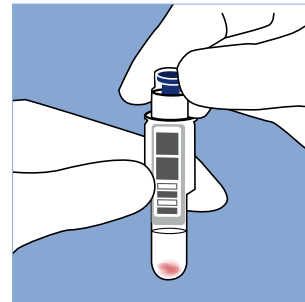


**4** Jól zárja le a küvetta a CRP reagenst tartalmazó kupakkal. Ne nyomja be a kupak belső, kék színű részét. Két órán belül el kell végezni a mérést.



**5** Válassza ki a **Mérés** lehetőséget a QuikRead go készülék kijelzőjén.

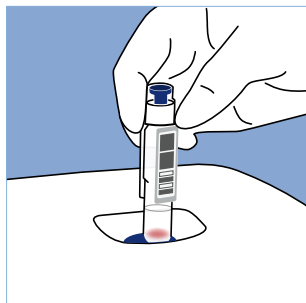

**6** Helyezze a küvetta a készülék mérőrekeszében. A vonalkódnak Ön felé kell tekintenie. A készülék felismeri a minta típusát. A mérés folyamata figyelemmel kísérhető a kijelzőn.

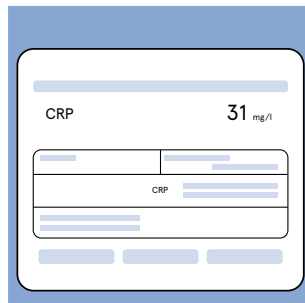

**7** A mérés befejeztével az eredmény megjelenik a képernyőn, és a küvetta automatikusan kiemelkedik a mérőrekeszből. A QuikRead go CRP+Hb teszt esetében a Hberedmény a CRP-eredmény alatt jelenik meg.

A mérés elvégzése előtt olvassa el a használati utasítást.

# QuikRead go<sup>®</sup> CRP és CRP+Hb



Készlet

Bontatlan készlet tárolása 2–8°C-on: a készlet **lejáratí idejéig**



Reagenskupakok  
tartályban

Bontatlan tartály tárolása 2–8°C-on: a készlet **lejáratí idejéig**  
Tárolás 18–25°C-on: **1 hónapig** (3 hónap ha 7.5óra/nap)



Küveták

Bontatlan fóliatasak 2–25°C-on: a készlet **lejáratí idejéig**  
Bontatlan küveták a fóliatasak felnyitása után:  
2–8°C-on: **6 hónap** / 18–25°C-on: **3 hónap**



Felnyitott  
küvetta

A teszt elvégzése előtt hagyja a puffert 18–25°C-ra felmelegedni  
A küvetta felnyitásától számított **2 órán** belül végezze el a tesztet  
A minta a pufferban **2 órán** át stabil



CRP kontroll-  
anyagok

Bontatlan üvegcsé 2–8°C-on: a **lejáratí idejéig**  
Felnyitott üvegcsé 2–8°C-on: **2 hónapig**



Hb  
kontrollanyag

Bontatlan üvegcsé 2–8°C-on: a **lejáratí idejéig**  
Felnyitott üvegcsé 2–8°C-on: **1 hónapig**

## Kapcsolat

Aidian Oy Finnország

HU, CZ, SK, PL képviselő:

Csehország, Prága, Bělohorská u. 57

Magyarországi munkatárs telefonszáma:  
+36205019012

Megrendelés: info@aidian.hu

www.aidian.hu / www.quikread.hu

www.tackleamr.com / www.testcrp.hu

Termék	Kat. szám
QuikRead go CRP kapillárisokkal és dugattyúkkal	135171
QuikRead go CRP+Hb kapillárisokkal és dugattyúkkal	140068
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb Control	141154
QuikRead Capillaries 20 µl	67962
QuikRead Plungers	67966
QuikRead go készülék	135867