




# QuikRead go<sup>®</sup> HbA1c

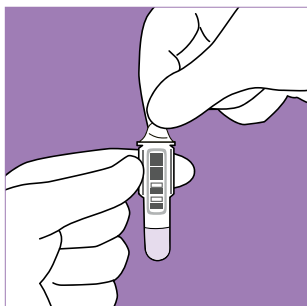


**1** Távolítsa el a küvetta védőfóliáját. A folyadék felszínének a küvetta jelölt két vonal között kell lennie. Ne érintse meg a küvetta alsó részének átlátszó sima felületeit.

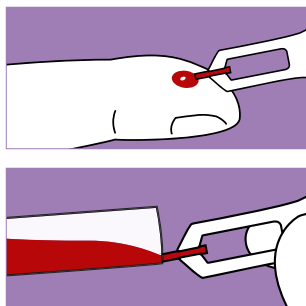


**2** Tartsa a 1µl-es mintagyűjtőt szinte vízszintesen, kizárólag a minta felszíne alá. Töltse meg teljesen a Sample Collector mintagyűjtő eszközt.

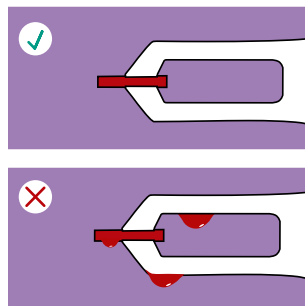


**Fontos!** Ellenőrizze, hogy a kapilláris rész teljesen feltöltődött-e. **Ne törölje le a mintagyűjtőt!** Ha túl sok a minta a Sample Collector mintagyűjtőben, dobja ki a Sample Collector mintagyűjtőt.

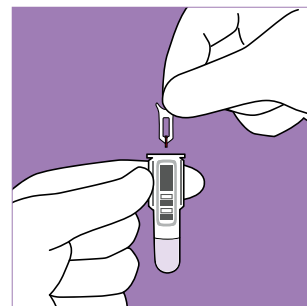

**3** Helyezze a mintagyűjtőt a küvetta 1 percn belül. A mintagyűjtő nem érintkezik a küvetta lévő oldattal.

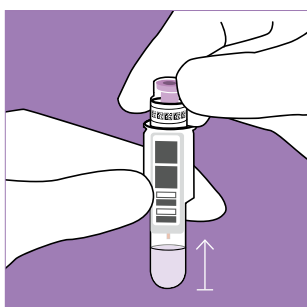

**4** Zárja le szorosan a küvetta a HbA1c reagens kupakkal. Ne nyomja be a reagens kupak ibolyaszín részét. Futtassa le a tesztet 5 percn belül. **A küvetta tartsa függőlegesen, és ne rázza fel.**

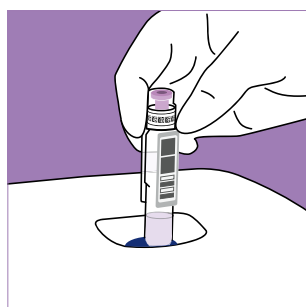

**5** Válassza a **Mérés** lehetőséget a QuikRead go készülék kijelzőjén. Helyezze a küvetta megfelelően a készülék mérőrekeszébe. A vonalkódnak Ön felé kell lennie.



**6** A mérés befejeztével az eredmény megjelenik a képernyőn, és a küvetta automatikusan kiemelkedik ha a mérés befejeződött.

A mérés elvégzése előtt olvassa el a használati utasítást.

# QuikRead go<sup>®</sup> HbA1c



Készlet

Bontatlan készlet 2–8 °C-on: a készlet **lejárati idejéig**  
Bontatlan készlet 18–25 °C-on: **2 hónap**



Küvetták

Bontatlan fólia tasak 2–8 °C-on: a készlet **lejárati idejéig**  
Bontatlan küvetták felbontott fóliatasakkal:  
2–8 °C-on: **6 hónap** / 18–25 °C-on: **2 hónap**



Felnyitott  
küvetta

A mérés elvégzése előtt hagyja a puffert 18–25 °C-ra felmelegedni  
A küvetta felnyitásától számított **1 órán** belül végezze el a tesztet  
A minta a kupakkal történő lezárást követő **5 percig** stabil a küvetttában



A Reagens  
kupak tubusa

Bontatlan tubus 2–8 °C-on: a készlet **lejárati idejéig**  
Az első felbontás után 2–8 °C-on: **6 hónap** / 18–25 °C-on: **2 hónap**



A mintavételi  
eszközök

Tárolás 2–25 °C-on: a Sample Collector 1µl  
mintagyűjtő dobozon lévő **lejárati dátumáig**



HbA1c  
kontroll szett

Bontatlan üveg 2–8 °C-on: a **lejárati dátumig**  
Nyitott üveg 2–8 °C-on: legfeljebb **50 napig**

## Kapcsolat

Aidian Oy Finnország  
HU, CZ, SK, PL képviselő:  
Csehország, Prága, Bělohorská u. 57  
Magyarországi munkatárs telefonszáma:  
+36205019012

Megrendelés: [info@aidian.hu](mailto:info@aidian.hu)

[www.aidian.hu](http://www.aidian.hu) / [www.quikread.hu](http://www.quikread.hu)

Termék	Kat. szám
QuikRead go HbA1c a QuikRead go Sample Collector 1µl mintavételi eszközzel, 25 teszt	151058
QuikRead go HbA1c kontroll szett	154520
QuikRead go készülék	135867
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 db	154457