


Rövid használati utasítás



1 Távolítsa el a küvetta védőfóliáját. Ne érintse a küvetta alsó részén található átlátszó, sima felületeket.



2 Tartsa a mintagyűjtőt szinte vízszintesen csak a minta felszíne alá. Töltse meg teljesen a Sample Collector mintavételi eszközt.

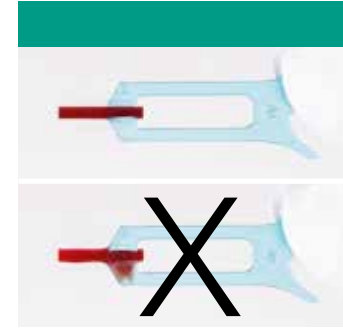

Jegyezze meg! Ellenőrizze, hogy a kapilláris része teljesen feltöltődött-e.

Ne törölje le a mintagyűjtőt!

Ha túl sok a minta a Sample Collector mintagyűjtőben, dobja ki a Sample Collector mintagyűjtőt.



3 2 percen belül helyezze a be a Sample Collector mintagyűjtőt küvetta alá és zárja be a küvetta a reagens kupakkal. Ne nyomja le a reagens kupak türkiz belső részét. Futtassa a tesztet 2 órán belül.



4 Válassza ki a *Mérés* lehetőséget a QuikRead go készülék kijelzőjén. Helyezze a küvetta mérőrekeszébe. A vonalkódnak Ön felé kell tekintenie.



5 A mérés befejeztével az eredmény megjelenik a képernyőn, és a küvetta automatikusan kiemelkedik a mérőrekeszből.

A mérés elvégzése előtt olvassa el a használati utasítást.



A reagensek tárolása



Bontatlan reagens készlet

Bontatlan készlet tárolása 2–25°C-on: a készlet lejáratási idejéig



Sample Collector mintagyűjtő doboz

Bontatlan készlet tárolása 2–25°C-on: a készlet lejáratának dátumáig



Bontatlan küvetta alumínium-védőfólia nélküli

Tárolása 2–8°C-on: 6 hónapig
Tárolása 18–25°C-on: 3 hónapig



Reagenskupak tartály

Bontatlan tartály tárolása 2–25°C-on: a készlet lejáratási idejéig
Az első felbontás után 2–25°C-on: 6 hónapig



Felnyitott küvetta

A minta a pufferoladatban két órán át stabil. Végezze el a mérést a küvetta felnyitásától számított két órán belül. A mérés elvégzése előtt hagyja a küvetta szobahőmérsékletűre felmelegedni.



easy CRP kontrollanyagok

(lásd az alábbi táblázatot)

Bontatlan üvegcse 2–8°C-on: a lejáratási idejéig
Az első felbontás után 2–8°C-on: 2 hónapig



Orion Diagnostica Oy
Képviselet ČR, HU, PL, SR, Bělohorská 57, 169 00 Prága 6, Csehország
Tel. +36 205 019 012
www.oriondiagnostica.hu, www.quikread.hu, www.tacklearm.com

8100-01HU, 09/2019

Termék	Kat. szám
QuikRead go easy CRP, 50 darab teszt » 10 µl űrtartalmú mintavételi eszközzel	153287
QuikRead go CRP Control Low (kontrollanyag)	153765
QuikRead go CRP Control (kontrollanyag)	153764
QuikRead go CRP Control Control (kontrollanyag)	153763
QuikRead go műszer	135867

További információk: www.quikread.hu