

Hygicult Y&F (Easicult M)

Easicult TTC

Easicult Combi

Mikroba kontroll különböző iparágakban.

Easicult® Model Chart

Easicult®

Mikrobák elleni védekezés különböző iparágakban.

Tárolás 18–25°C-on, huzat és hőmérséklet-ingadozás elkerülése mellett.

Easicult® Combi

- A polipropilén (PP) csöves változat (Kat. sz. 05984) eltarthatósága a gyártástól számított kilenc hónap.
- Inkubálás 27–30°C-on 24–48 óráig a baktériumok kimutatására és három nap az élesztők és penészgombák kimutatására. Inkubálás szobahőmérsékleten 2–4 napig, illetve 4–7 napig.
- Kimutatási tartomány 10^3 – 10^7 CFU/ml

Easicult® TTC

- A polipropilén (PP) csöves változat (Kat. sz. 05988) eltarthatósága a gyártástól számított kilenc hónap.
- Inkubálás 35–37°C-on 24 órán át, at 27–30°C-on 48 órán keresztül vagy 22°C-on legfeljebb 5 napig.
- Kimutatási tartomány 10^3 – 10^7 CFU/ml

Hygicult® Y&F (Easicult M)

- Kat. sz. 68013
- Eltarthatósága a gyártástól számított hat hónap.
- Inkubálás 27–30°C-on 48 órán keresztül. Ha nem jelenik meg növekedés, folytassa az inkubációt további 48 órán keresztül.
- Az élesztő kimutatási tartománya 10^3 – 10^6 CFU/ml

További részletekért kérjük, olvassa el a használati utasítást.

Könnyedén használható!



Merítés vagy tampon




Inkubálja



Értékelje



Easicult®

Telep sűrűsége

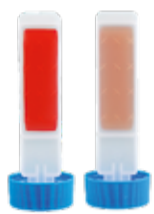


Easicult Combi

Összes baktérium,
élesztő és penész

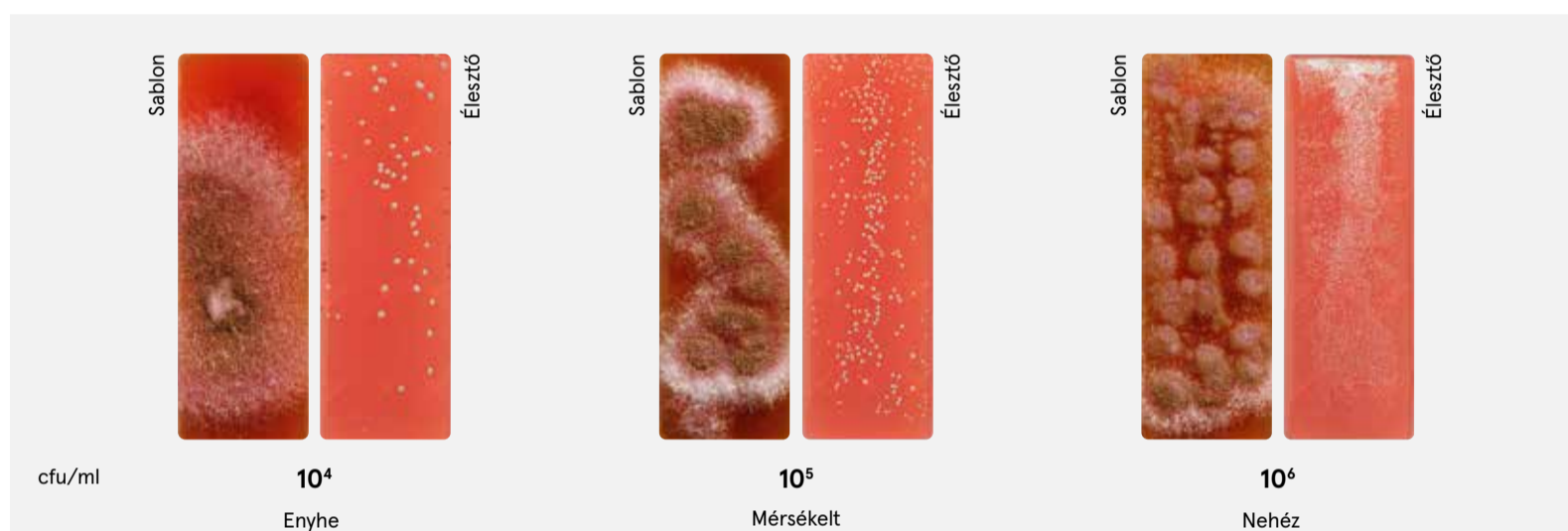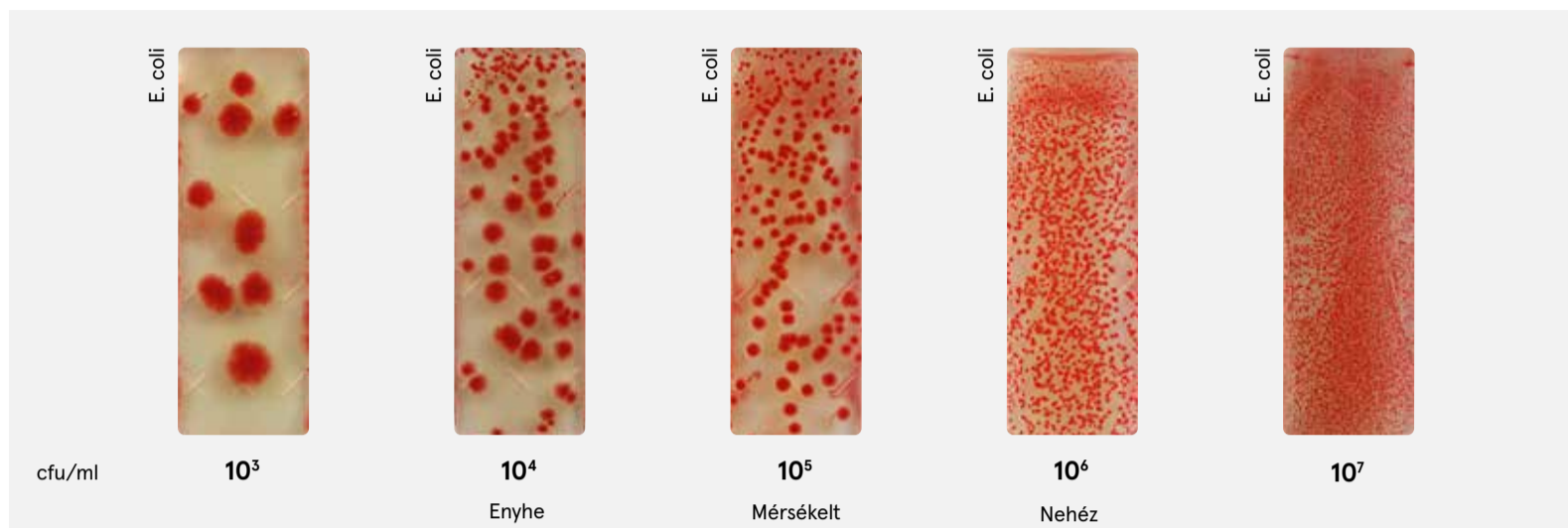

Easicult TTC

Összes baktérium

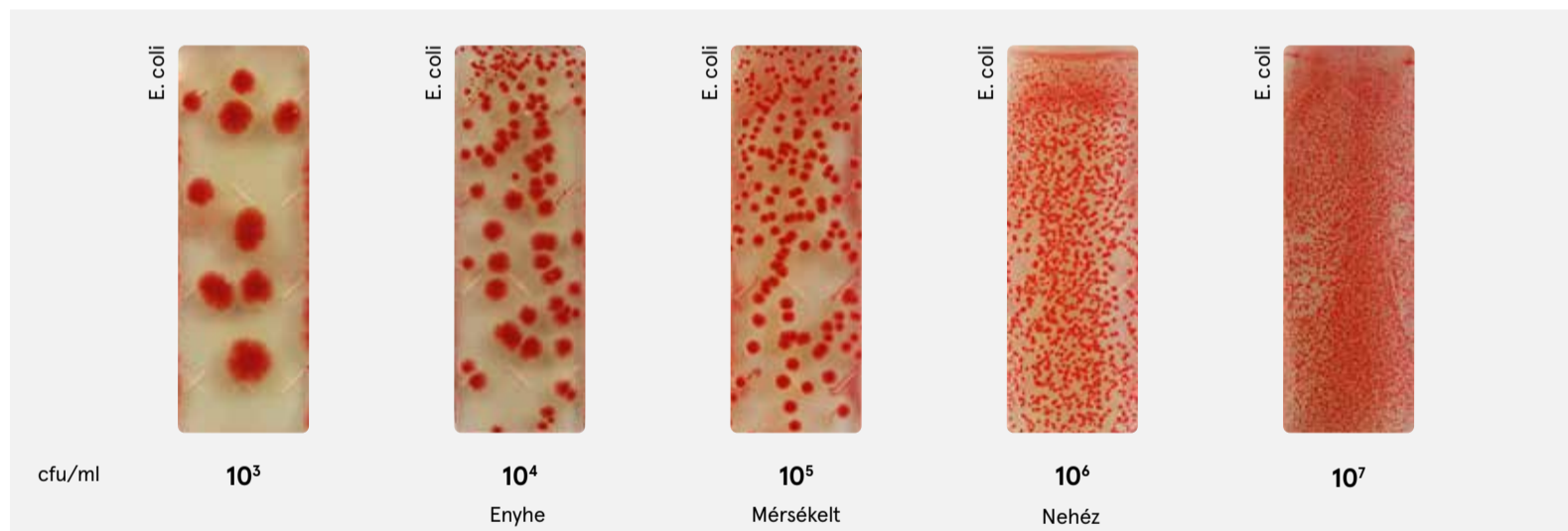

Hygicult Y&F (Easicult M)

Élesztők és
penészgombák

